

Behandelpaneel voor medium- en intensive care:  
ICU, NICU - SEH- Poli- en andere behandel afdelingen

# N-Care- vs100





Modulair systeem met : 1, 2  
of meer kanalen

Inbouw van alle type  
E- componenten  
en medische gasventielen.

Met DIN rail 10x25 mm voor het  
bevestigen van accessoires.

**MEDFLEX**  
care for solutions

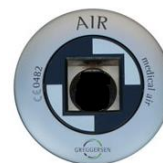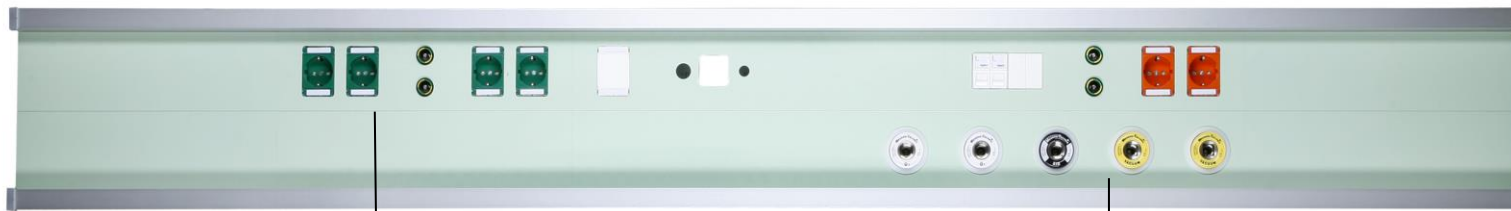

Naar uw wens en situatie te configureren en op de millimeter nauwkeurig geproduceerd

Opgebouwd uit  
Modulaire aluminium profielen

A-merk Schakelmateriaal:  
Merten, of anders: op aanvraag

Eenvoudig aan te sluiten  
d.m.v. Wago railklemmen.  
Vanuit de wand of met een  
toevoerkanaal




Flexibel wcd 's en gas afnamepunten plaatsen zonder bouwkundige aanpassingen.

Infuusflessen houders, ladekasten, een uitgebreide mogelijkheid aan Accessoires kunnen gemonteerd worden.



Montage van 50 kg/m.  
Geschikt voor het plaatsen van PDMS en bewaking monitoren



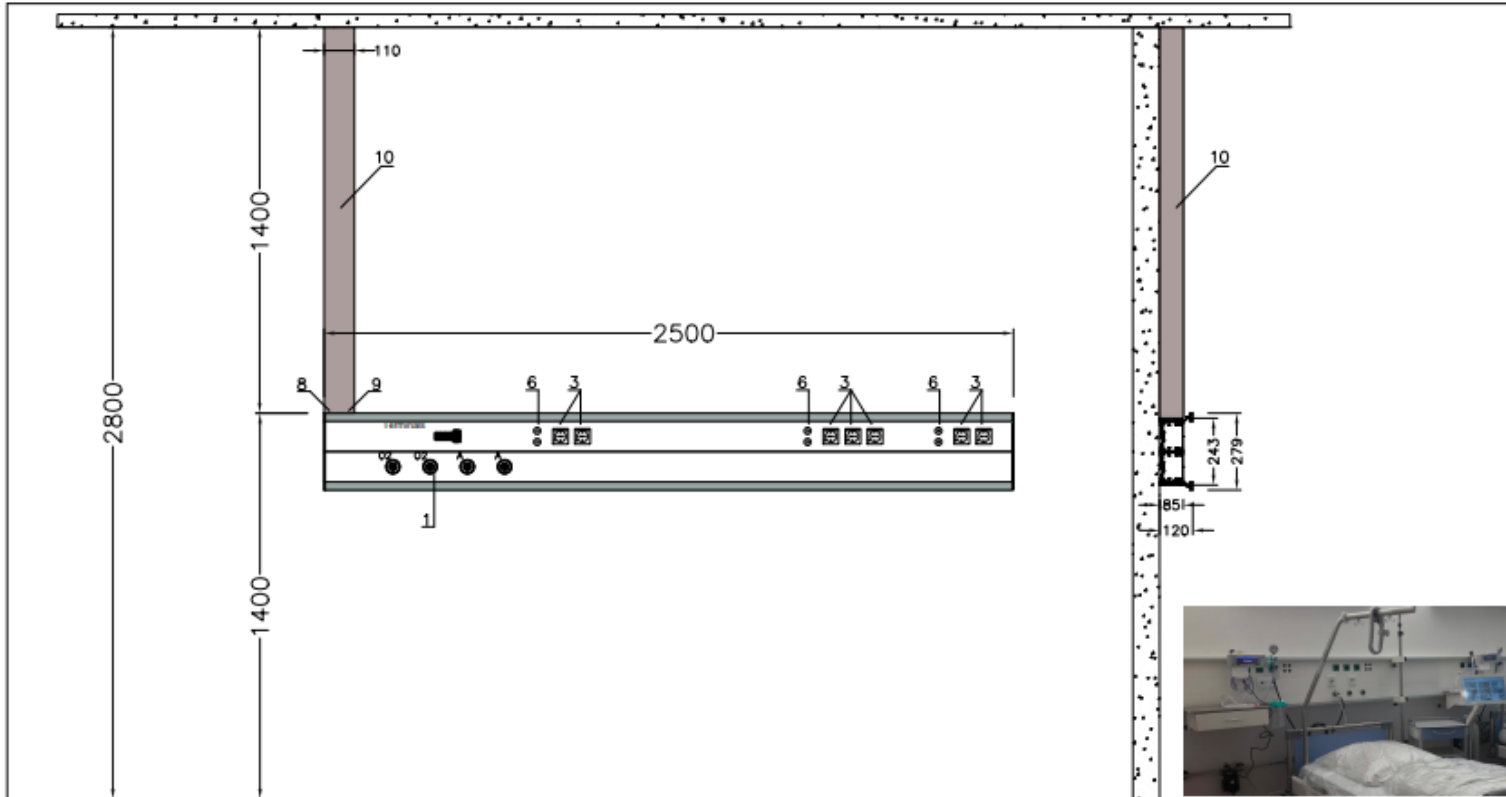

**Uitvoering:** 1- of meer beds. Lengte paneel tot 4 meter uit 1 lengte. Grotere lengtes zijn mogelijk met koppeling. Het paneel is opgebouwd uit modulaire aluminium profielen. Met afneembare frontplaten. Kleur frontplaten: Wit RAL9010 of zilvergrijs. Andere RAL kleuren op aanvraag.

**Medische gasventielen:** compatibel met DIN, Parkodex, Medap en Medicare. Andere fabrikaten op aanvraag. Plaatsing: frontzijde. Interne gasleidingen worden af-fabriek aangelegd en getest.

**Schakelmateriaal:** fabricaat PEHA, wcd 's met optioneel: tekstvensters en LED indicatie. Andere fabricaten op aanvraag. Plaatsing schakelmateriaal: onderzijde of frontzijde. Groepenindeling naar wens.

**Verpleegoproep:** Ascom, CLB, Ackerman of andere VOS systemen zijn in te bouwen. Aansluiting: direct op de installatie.






**Invoering Elektrische en Gas technische leidingen:** Via de achterzijde van het paneel of vanuit het plafond via een toevoerkanaal met scheidingschotten.

11									
10	1	Installation channel to the ceiling	110x85mm L=1400mm						
9	1	Access electricity	From installation channel						
8	1	Access gas	From installation channel						
7									
6	6	Earth Equipotential	DIN						
5									
4									
3	7	Electrical sockets 220V schuko	MERTEN, with Label-field + Led						
2									
1	2	Gas outlets DIN	Gas outlets and pipping included						
Marca	Cant.	Descripción	Observaciones						
				RC03-02	Revision	Fecha	Realizado	MODIFICATION S	
					Realizado	10/03/23	Abelardo	Tipo	
					Revisado				
					Aprobado				
				Escala	BHU 1 Bed RAL9010 matt L=2.500mm				Remplaza a :
									Remplaza a :

Voorbeeld: 1 bed unit

Mogelijke varianten

Doorsnede

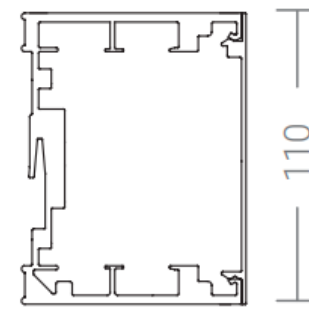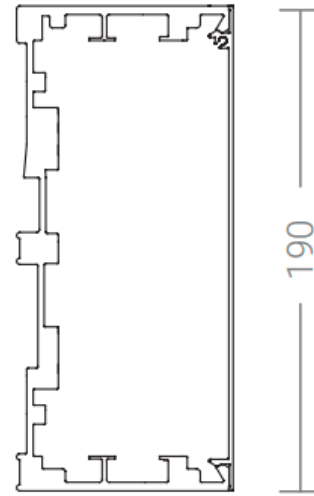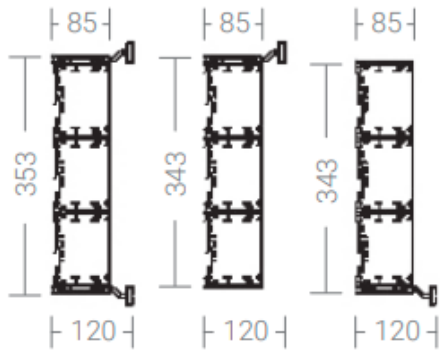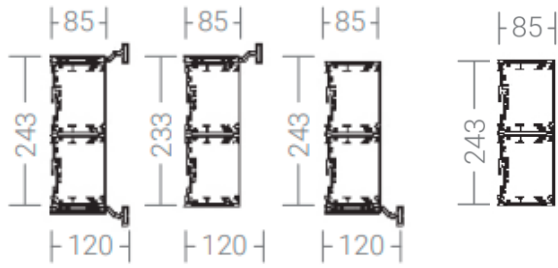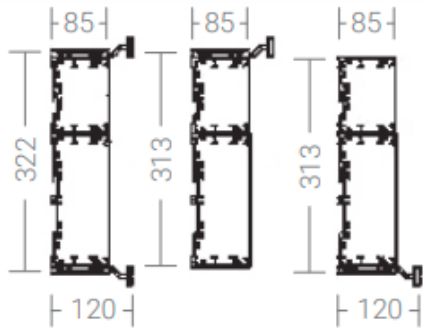

Voorbeelden en varianten

