

# M-Care: VS300



Inbouw paneel geschikt voor het inbouwen in meubels en wanden.

Inbouw van alle type E- componenten en medische gasventielen.

Enkel, dubbel of meer kanaals uit Te voeren

Met bevestigingsklemmen voor een eenvoudige montage




Naar uw wens en situatie te produceren

Opgebouwd uit  
Modulaire aluminium profielen

A-merk Schakelmateriaal: PEHA

## Voorbeeld

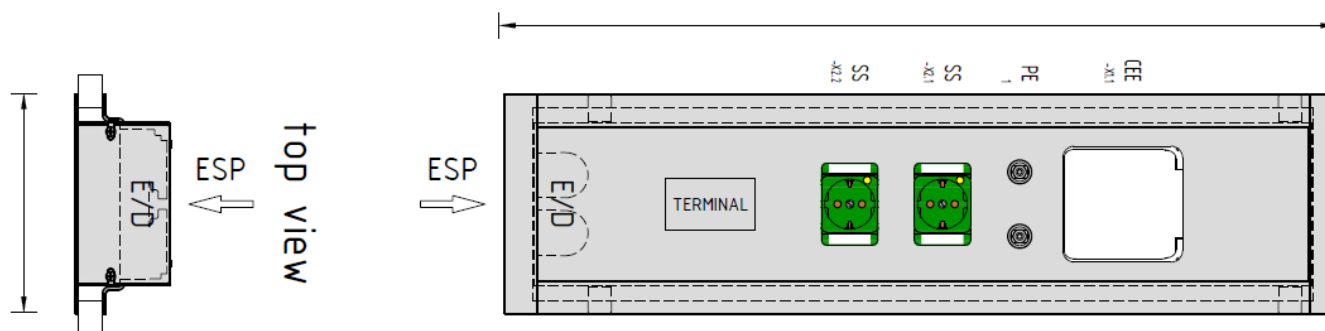

Het Medflex M Care VS300 paneel is bij uitstek geschikt om in te bouwen in meubels of een gipswand. Hierdoor is het paneel netjes geïntegreerd in de wand. Alle elektra- en gascomponenten kunnen door ons worden ingebouwd en worden op 1 punt aangesloten: plug & play installatie.

Het paneel is opgebouwd uit hoogwaardige aluminium geëxtrudeerde profielen en uit te voeren in alle lengtes en 1, 2 of meer kanaals uitvoeringen.

Door de ingebouwde klem inrichtingen, kan het paneel eenvoudig in de wand worden geklemd. De rozet rondom het paneel zorgt voor een afgewerkt aanzicht in de wand. Verder is het paneel in elke RAL kleur verkrijgbaar of Aluminium geeloxideerd.





De elektrische bedradingen worden op een klemmenstrook bedraad, zodat eenvoudig kan worden aangesloten vanuit de installatie. Hier kan ook een 16 mm<sup>2</sup> vereffening op worden aangesloten. De eventuele gasleidingen worden ook naar 1 punt gelegd, zodat deze met de W installatie kunnen worden verbonden.

Inbouw van alle type E- componenten en medische gasventielen.

Enkel, dubbel of meer kanaals uit te voeren

Met bevestigingsklemmen voor een eenvoudige montage



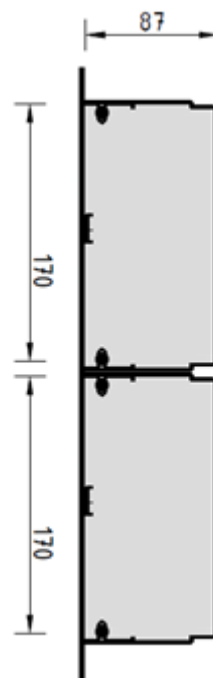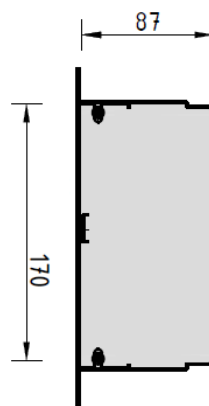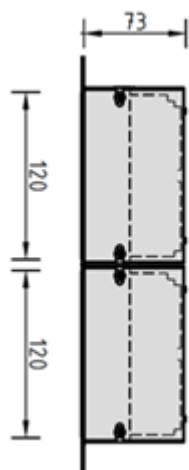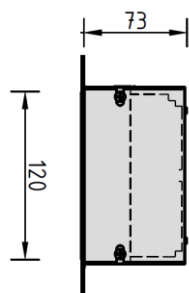

Voorbeelden van configuraties

**Uitvoering:** 1- of meer beds. Lengte paneel tot 2 meter uit 1 lengte. Grotere lengtes zijn mogelijk met koppeling. Het paneel is opgebouwd uit modulaire aluminium profielen. Aan de frontzijde afgewerkt met een rozet.

**Medische gasventielen:** compatibel met DIN, Parkodex, Medap en Medicare. Andere fabrikaten op aanvraag. Plaatsing: frontzijde. Interne gasleidingen worden af-fabriek aangelegd en getest.

**Schakelmateriaal:** fabricaat PEHA, wcd 's met optioneel: tekstvensters en LED indicatie. Andere fabricaten op aanvraag. Plaatsing schakelmateriaal: onderzijde of frontzijde. Groepenindeling naar wens.

**Verpleegoproep:** Ascom, CLB, Ackerman of andere VOS systemen zijn in te bouwen. Aansluiting: direct op de installatie.

**Invoering Elektrische en Gas technische leidingen:**  
Via de achterzijde van het paneel

**Aansluiting op de Elektrische en Gas technische installatie:**  
Sterkstroom voeding en aarding wordt aangesloten om klemmenstroken op 1 centraal punt. De interne bedrading wordt volledig door ons uitgevoerd. De gasleidingen kunnen links of rechts van het paneel worden aangesloten op onze interne gasleidingen. Wij sluiten de medische gasafname punten in het paneel aan.